


FX205m

Plus court et plus léger, pour un équilibre parfait

Le moteur pneumatique FX205m est 25 % plus court et 15 % plus léger que les modèles précédents. Il offre un équilibre optimal tout en réduisant le stress et la fatigue pendant les interventions, pour vous permettre de vous concentrer sur le traitement.



Une taille et un poids réduits, pour un équilibre parfait

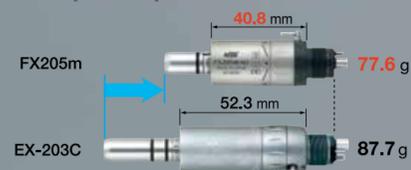

Résistance exceptionnelle aux passages en autoclave et thermodésinfections répétés

Le FX205m résiste de manière exemplaire aux passages en autoclave jusqu'à 135°C et aux thermodésinfections.



Moteur pneumatique FX205m

- Corps en acier inoxydable
- Spray externe
- Vitesse max. 25.000 min⁻¹



MODÈLE FX205m M4

RÉFÉRENCE M1005

- Midwest 4 voies

MODÈLE FX205m B2

RÉFÉRENCE M1006

- Borden 2 voies

Pack moteur pneumatique FX205m



MODÈLE FX205m M4 Set

RÉFÉRENCE Y1002752

- Midwest 4 voies

MODÈLE FX205m B2 Set

RÉFÉRENCE Y1002753

- Borden 2 voies

- Contenu
- Moteur pneumatique (FX205m)
 - Pièce à main droite (FX65m)
 - Contre-angle (FX25m)

Pièces détachées / Accessoires

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
FX25-04	Couvercle pour FX25m	C1052500	Bague de spray	pour FX25m/FX15m	C1052702	Tuyau de spray (RSM)		Z166101
FX25-03	Cartouche pour FX25m	C1052700	Clé	Pour FX25m	C1052701			



Lavable en thermodésinfecteur



Passage en autoclave jusqu'à 135°C

NAKANISHI INC
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666 - Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK France
www.nsk.fr
32, rue de Lisbonne
75008 Paris - France
TEL : +33(0)1 567 959 80
FAX : +33(0)1 567 959 81

Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis

PR-D766F Ver.1 07.02.13.A

NSK

Serie FX




Serie FX

Un contre-angle qui offre des performances et une longévité maximales

Avec la série FX, nous avons créé des contre-angles monocorps qui reflètent les technologies développées par NSK au fil de son histoire. Le corps a été spécialement étudié pour offrir un champ opératoire plus large et une meilleure prise en main. L'acier inoxydable garantit quant à lui une longévité supérieure et plus de légèreté, d'où une facilité d'utilisation et une polyvalence excellentes. Les contre-angles de la série FX se nettoient facilement. Pour répondre aux attentes des professionnels qui traitent une grande variété de cas cliniques, la gamme FX permet d'effectuer tous les travaux de découpe ainsi que les traitements d'endodontie.


Un corps en acier inoxydable massif

L'acier inoxydable est plus léger et résistant que le laiton, d'où un poids inférieur et une forme équilibrée qui offrent une maniabilité sans égal.

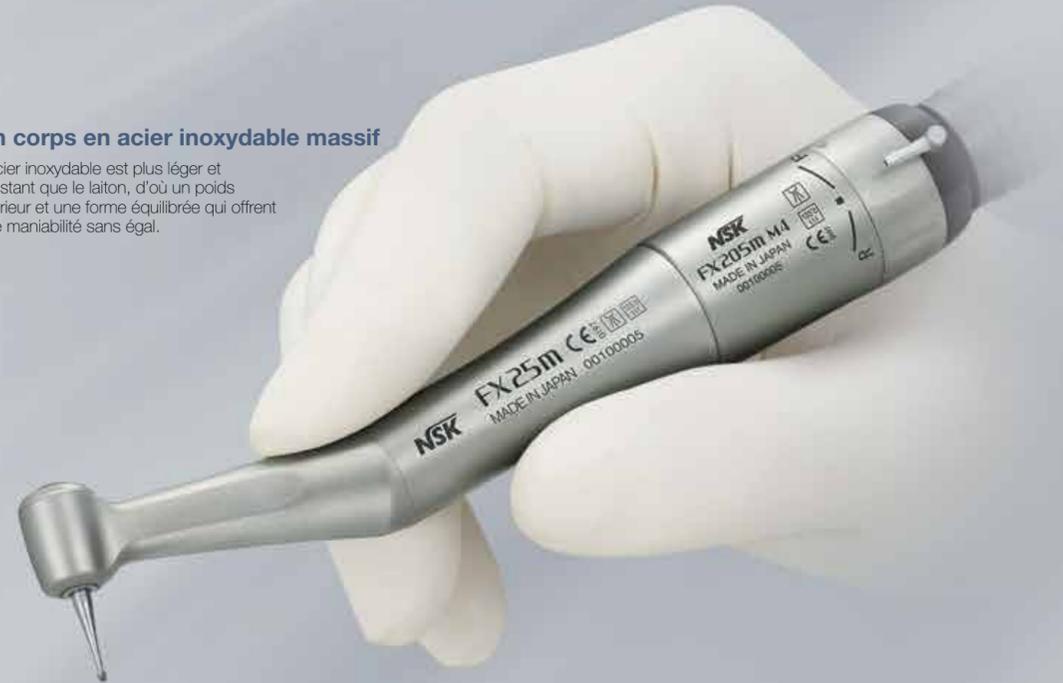

Une forme ergonomique

Une visibilité à 360° : le col et le corps extrêmement fins ainsi que la tête ultra mini offrent une meilleure visibilité opératoire y compris dans les zones difficiles d'accès de la cavité buccale.
Convivialité : vous apprécierez l'accessibilité maximale pendant les interventions grâce à son design, parfaitement équilibré et ergonomique, pour réduire le stress lié aux différents traitements.

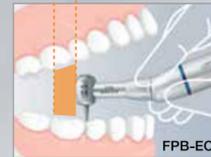

Une accessibilité maximale

Remplacement facile de la cartouche

Les cartouches se changent facilement à l'aide des outils spécifiques fournis, ce qui vous aide à maîtriser les coûts et les périodes de non-utilisation (FX25m uniquement).



Griffe bouton-poussoir

La griffe bouton-poussoir de NSK permet d'insérer et de retirer la fraise d'un seul geste et sans outil.



Des engrenages de haute précision

Ils permettent un fonctionnement silencieux et sans vibration.



Entretien

Le corps intégré et élégant permet un nettoyage simple et complet après chaque intervention pour garantir un niveau d'hygiène élevé.



Couvercle bouton-poussoir

Le bouton-poussoir a été conçu pour ne pas s'enfoncer lorsqu'il est dans la bouche, afin d'empêcher la fraise de se détacher en cours de traitement.

Une résistance extrême aux passages en autoclave et thermodésinfections

La série FX résiste de manière exemplaire à des passages en autoclave jusqu'à 135°C et des thermodésinfections.



« Paste Defense System »

La tête du FX57m intègre un mécanisme anti-poussière original et inédit appelé « Paste Defense System ». Ce mécanisme évite la pénétration des débris de pâte à l'intérieur de la tête. Le revêtement DLC (Diamond Like Carbon) du rotor permet d'éviter les ruptures provoquées par les frottements, ce qui contribue à accroître la longévité de l'instrument (FX57m uniquement).



La gamme de contre-angles FX

Contre-angle pour applications générales

Rapport direct 1 : 1



- MODÈLE FX25m RÉFÉRENCE C1052
- Pour fraises CA (ø 2,35)
 - Griffe bouton-poussoir
 - Roulements à billes
 - Vitesse max. : 40,000 min-1

Contre-angle endodontique

Réduction 16 : 1



- MODÈLE FX75m RÉFÉRENCE C1055
- Tête mini
 - Pour limes mécaniques
 - Rotation 360°
 - Griffe bouton-poussoir
 - Vitesse max. : 1,250 min-1

Réduction 4 : 1



- MODÈLE FX15m RÉFÉRENCE C1053
- Pour fraises CA (ø 2,35)
 - Griffe bouton-poussoir
 - Roulements à billes
 - Vitesse max. : 10,000 min-1

Contre-angle prophylaxie

Réduction 4 : 1



- MODÈLE FX57m RÉFÉRENCE C1054
- Pour cupules et brosses à visser (non fournies)
- Rotation 360°
 - Paste Defense System
 - Sans spray
 - Vitesse max. : 10,000 min-1

Pièce à main droite

Rapport direct 1 : 1



- MODÈLE FX65m RÉFÉRENCE H1014
- Pour fraises PM (ø 2,35)
 - Vitesse max. : 40,000 min-1



Lavable en thermodésinfecteur



Passage en autoclave jusqu'à 135°C